



**Пессарии акушерские, урологические
ARABIN®**

**Инструкция по использованию медицинского изделия
Пессарий Кольцо для адаптации тип R-set**

ОПИСАНИЕ

Пессарий Кольцо для адаптации сделан из гибкого биосовместимого силикона. Данный пессарий служит исключительно для подбора правильного размера пессария - кольца, толстого кольца, пессария Ходжа, чашечного пессария, уретрального, чашечно-уретрального или кубического пессария. Пессарий Кольцо для адаптации не предназначен для коррекции пролапса.

ПОКАЗАНИЯ

Пессарий Кольцо для адаптации используется для индивидуального подбора размера пессария.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Местный инфекционный процесс, возможна установка пессария после санации влагалища и получения результатов повторного бактериологического исследования.

ОСЛОЖНЕНИЯ/ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ввиду того, что изделие применяется кратковременно, сведения о побочных эффектах при длительном использовании отсутствуют. При применении кольца неподходящего размера, могут возникнуть кратковременные боли/ дискомфорт при введении/ извлечении кольца.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Перед использованием внимательно прочитайте Инструкцию по использованию медицинского изделия.

Используйте изделие только по назначению.

Пессарий Кольцо для адаптации предназначен для кратковременного контакта со слизистыми оболочками влагалища пациентки.

Перед использованием внимательно прочитайте руководство пользователя.

Изделие может быть использовано только специально обученным и квалифицированным медицинским персоналом.

Не используйте изделие при наличии вагинальных инфекций у пациента.

Используйте изделие ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОЧИСТКИ!

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОЧИСТКА

Перед каждым применением необходима обработка с использованием хлоргексидина или других дезинфицирующих средств. Следуйте инструкции по очистке изделия для его повторного использования. Очищайте руки перед использованием или используйте средства индивидуальной защиты.

Изделие может быть очищено и дезинфицировано, предпочтительно с использованием альдегидсодержащих растворов. Свойства материала позволяют многократно дезинфицировать изделие.

ВЫБОР РАЗМЕРА

Выбор размера пессария осуществляется врачом акушером-гинекологом индивидуально для каждой пациентки. Первичный подбор размера пессария осуществляется в литотомическом положении пациентки (на гинекологическом кресле) при наполненном мочевом пузыре. Диаметр колец от 45мм до 100мм, с шагом 5 мм:

- маленькое кольцо, диаметр: 45 / 50 / 55 / 60 мм

- нормальное кольцо, диаметр: 65 / 70 / 75 / 80 мм

- большое кольцо, диаметр: 85 / 90 / 95/100 мм

Пессарий Кольцо для адаптации тип R-set:

Артикул	Размер (диаметр), мм
R-set малое	45; 50; 55; 60;
R-set нормальное	65; 70; 75; 80
R-set большое	85; 90; 95; 100

Таблица соответствующих размеров кубического пессария на основе тестирования с помощью пессария Кольцо для адаптации

Пессарий Кольцо для	Кубический Пессарий/
---------------------	----------------------


адаптации, диаметр	длина края куба
45-50 мм	размеры от 0/до 25 мм
55-60 мм	размеры от 1/до 29 мм
60-70мм	размеры от 2/до 32 мм
70-75мм	размеры от 3/до 37 мм
80-85мм	размеры 4/до 41 мм
> 90мм	размеры 5/до 45 мм

ВВЕДЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЕССАРИЯ

Перед установкой пессария кольца для адаптации необходимо выполнить микроскопию мазков влагалищного содержимого, чтобы исключить бактериальную колонизацию.

После дезинфекции пессарий смазывают небольшим количеством лубриканта на водной основе. При установке пессария необходимо жать кольцо и установить пессарий глубоко во влагалище, убедиться, что пессарий расположен в верхнем своде. Врач устанавливает пессарий-кольцо для адаптации при первом осмотре, проверяя, как держится пессарий при кашле, напряжении и движении. После испытания, положение пессария-кольца должно быть проверено снова и оно должно быть удалено. Оптимальным следует считать тот размер кольца, который не изменяет своего положения во влагалище после нагрузки и не создает ощущение дискомфорта у пациентки. Пессарий именно такого размера и следует выбрать.

Метод подбора размера пессария с использованием адаптационных колец обладает высокой точностью и обеспечивает комфорт пациентке.

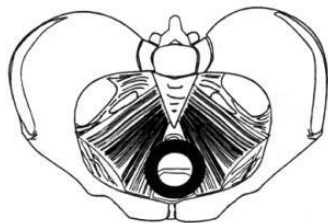

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование продукции производят всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке. Транспортирование производится при температуре -40°C - + 40°C и относительной влажности до 98%.

При транспортировке требуется сохранять целостность упаковки!

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить при температуре от + 15 до +25°C, защищая от воздействия прямых солнечных лучей. Срок годности изделия – 10 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Специальных требований к их утилизации и уничтожению нет. В соответствии с локальными нормами и предписаниями, пользователь может утилизировать данные медицинские изделия вместе с соответствующими бытовыми отходами.

Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2011/11086 от 27 июня 2022 года.

Производитель

«Др.Арабин ГмбХ и Ко. КГ», Германия,
Dr. Arabin GmbH & Co. KG, Alfred-Herrhausen-Str. 44, D-58455 Witten, Germany

Место производства:

1. ЗАО «Пенткрофт Фарма», Россия, 141860, Московская обл., Дмитровский р-н, пос. Икша, ул. Водников, д.9.
2. DINO AG, Hohentwielsteig 6 a, 14164, Berlin, Deutschland.

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

Закрытое акционерное общество "Пенткрофт Фарма" (ЗАО "Пенткрофт Фарма").

Юридический адрес: 129110, Россия, г. Москва, Проспект Мира д 68, стр.2, к.1

Тел.: +7(495)788-77-46

E-mail: pentcroft@mail.ru

