



Пессарии акушерские, урологические ARABIN®

Инструкция по использованию медицинского изделия Пессарий Уретральный тип UP

ОПИСАНИЕ

Уретральный пессарий имеет форму кольца с небольшим утолщением в передней части. Выполнен из гибкого биосовместимого гипоаллергенного силикона, благодаря чему его можно легко и безболезненно ставить и удалять как врачом, так и пациенткой самостоятельно.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Пессарий предназначен главным образом для пациенток со стрессовым недержанием мочи, возможно, отягощенным опущением органов малого таза. Пессарий помогает предотвратить недержание мочи, благодаря утолщению, с помощью которого поддерживается перемишка между мочевым пузырем и уретрой и предотвращается открытие верхней уретры при нагрузке, например, при кашле, чихании или движении. Он также помогает избежать просачивания мочи в уретру, что помогает справиться с недержанием при позывах, а также при одновременном воздействии нагрузки и позывов.

Для применения этого вида пессария обязательным условием является отсутствие повреждения тазового дна.

ПОКАЗАНИЯ

Бессимптомный или симптомный пролапс органов малого таза любой степени, стрессовое недержание мочи и иных проявлений дисфункции тазового дна в случаях, когда хирургическое вмешательство временно нежелательно для пациента или совсем невозможно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Местный инфекционный процесс, возможна установка пессария после санации влагалища и получения результатов повторного бактериологического исследования;

ОСЛОЖНЕНИЯ/ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

При применении неподходящего размера пессария могут возникать дискомфорт, боли при введении/удалении, затруднения при мочеиспускании и дефекации, смещение пессария.

При регулярном извлечении, обработке и повторном введении пациенткой, и дополнительном использовании крема с эстрогеном после наступления менопаузы, возможно избежать осложнений, таких как вагиниты, кровотечения, трофические язвы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

Перед применением внимательно прочитайте Инструкцию по использованию медицинского изделия.

Используйте изделие только по назначению.

Пессарий уретральный предназначен для длительного контакта со слизистыми оболочками влагалища пациентки. Пессарий обычно устанавливается на период физической активности, т.е. вводится утром и извлекается на ночь. Если пациентка самостоятельно не может вводить и удалять пессарий, то длительность непрерывного ношения пессария не должна превышать 28 дней.

Изделие не должно использоваться другими пациентками и должно храниться при комнатной температуре.

Не допустимо применение после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Не допускается использование при наличии повреждений (трещины, надрезы и т.п.).

Следует учитывать противопоказания для применения крема с эстриолом (например, беременность, период кормления грудью, эстрогензависимые опухоли).

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ОЧИСТКА

Изделие нестерильно, перед применением необходимо извлечь из упаковки и обработать антисептическим средством. Процедура должна проводиться либо в одноразовых стерильных перчатках, либо без перчаток, но после тщательной антисептической обработки (мылом, антисептическим средством).

Повторно использоваться (введение/извлечение в рамках назначенной терапии) оно должно только после обработки. В домашних условиях пессарий можно мыть теплой водопроводной водой с мылом, возможно использование хлорсодержащих средств.

ВЫБОР РАЗМЕРА ПЕССАРИЯ

Выбор размера пессария осуществляется врачом акушером-гинекологом индивидуально для каждой пациентки. Первичный подбор размера пессария осуществляется в литотомическом положении пациентки (на гинекологическом кресле) при наполненном мочевом пузыре. Диаметр пессариев варьируются от минимального- 45 мм до максимального- 100 мм, с шагом в 5 мм. Должен быть выбран размер, который позволяет достигать наилучшего клинического эффекта и устранять недержание мочи при кашле в положении стоя и в то же время не затрудняет мочеиспускание.

Пессарий Уретральный тип UP

Артикул	Размер (диаметр), мм	Артикул	Размер (диаметр), мм
UP 045	45	UP 075	75
UP 050	50	UP 080	80
UP 055	55	UP 085	85
UP 060	60	UP 090	90
UP 065	65	UP 095	95
UP 070	70	UP 100	100

ВВЕДЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЕССАРИЯ

Перед установкой пессария необходимо выполнить микроскопию мазков влагалищного содержимого, чтобы исключить бактериальную колонизацию.


После дезинфекции пессарий смазывают небольшим количеством крема, разрешенного к применению в гинекологии или лубрикантом на водной основе.

Пессарий сжимают и в сжатом виде вводят во влагалище. Врач регулирует положение пессария при первом осмотре на смотровом кресле при полном мочевом пузыре. При установке пессария кольцо следует передвигать через влагалищный свод в направлении вверх так, чтобы утолщение поднимало перемычку между мочевым пузырем и уретрой (см. рис. ниже).

Затем пациентку просят покашлять, напрячь пресс и подвигаться, при этом если отмечается подтекание мочи, положение пессария регулируется снова. При адекватном положении пессария могут быть компенсированы даже серьезные случаи недержания мочи при нагрузке. Важно, чтобы пациентка научилась заменять пессарий самостоятельно, необходимо удалять его вечером и вставлять утром, или использовать его только в некоторых случаях, например, во время физических нагрузок.

Самостоятельная установка пессария пациенткой может быть выполнена в положении стоя, поставив одну ногу на табурет или на край кровати, как и в позиции, используемой при установке гигиенического тампона. Если это слишком сложно, можно вставлять пессарий, вытянув ноги и, если необходимо, прислонившись к стене или в положении лежа. Пациентка должна быть обучена тому, как устанавливать пессарий (например, сначала нажать на кольцевую часть и затем подтолкнуть его к верхней части влагалища, так чтобы утолщение оказалось под симфизом), и как удалить его (охватить кольцо указательным пальцем за край и извлечь пессарий).

Если пациентка не может заменить пессарий самостоятельно, желательно пригласить медицинскую сестру или члена семьи, который поможет удалить/установить пессарий.

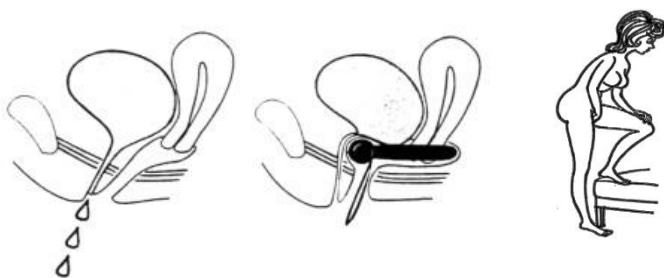

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОК

Перед манипуляциями с пессарием необходимо тщательно вымыть руки водопроводной водой с мылом или антисептиком.

После введения пессария, убедитесь, что не возникают неприятные ощущения, затруднения при мочеиспускании и дефекации. При появлении боли во влагалище или при выпадении изделия необходимо использовать пессарий другого размера.

Попробуйте под наблюдением врача самостоятельно установить и извлечь пессарий.

Во время использования пессария необходимы регулярные гинекологические осмотры. Это необходимо для оценки эффективности и контроля проводимого лечения.

Для профилактики воспалительных осложнений важно соблюдать рекомендации лечащего врача, правила гигиены и сроки непрерывного ношения пессария.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование продукции производят всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами, утвержденными в установленном порядке. Транспортирование производится при температуре -40°C - + 40°C и относительной влажности до 98%.

При транспортировке требуется сохранять целостность упаковки!

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

Хранить при температуре от + 15 до +25°C, защищая от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности изделия – 10 лет.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Специальных требований к их утилизации и уничтожению нет. В соответствии с локальными нормами и предписаниями, пользователь может утилизировать данные медицинские изделия вместе с соответствующими бытовыми отходами.

Регистрационное удостоверение: № ФСЗ 2011/11086 от 27 июня 2022 года.

Производитель

«Др.Арабин ГмбХ и Ко. КГ», Германия,

Dr. Arabin GmbH & Co. KG, Alfred-Herrhausen-Str. 44, D-58455 Witten, Germany

Место производства:

1. ЗАО «Пенткрофт Фарма», Россия, 141860, Московская обл., Дмитровский р-н, пос. Икша, ул. Водников, д.9.

2. DINO AG, Hohentwielsteig 6 a, 14164, Berlin, Deutschland.

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

Закрытое акционерное общество "Пенткрофт Фарма" (ЗАО "Пенткрофт Фарма").

Юридический адрес: 129110, Россия, г. Москва, Проспект Мира д 68, стр.2, к.1

Тел.: +7(495)788-77-46

E-mail: pentcroft@mail.ru

